



SilverPlug®

LO STRUMENTO PIÙ INTELLIGENTE PER SIGILLARE IL TUNNEL IMPLANTARE.

COS'È SILVERPLUG®?

SilverPlug® è l'UNICO Sigillante Attivo specifico brevettato, registrato e certificato in tutto il mondo per sigillare il tunnel di accesso alla vite di serraggio tra la componente protesica e l'impianto.

SilverPlug® è un dispositivo medico di Classe IIA costituito da un polimero contenente ZEOLITE D'ARGENTO, un antibatterico naturale. Non rilascia argento nel corpo.

SilverPlug® riduce drasticamente la percentuale di batteri anaerobi all'interno del tunnel di accesso alla vite di serraggio tra la componente protesica e l'impianto, che è una delle principali cause della perimplantite.



PERCHÉ USARE SILVERPLUG®?

Sotto carico, gli impianti sono soggetti a micromovimenti meccanici che generano un effetto di aspirazione simile a una pompa, che risucchia la saliva dalla bocca all'interno del tunnel di accesso alla vite di serraggio.

Materiali di riempimento NON CERTIFICATI (cemento provvisorio, pellet di cotone, guttaperca, teflon o cera) creano un ambiente in cui le condizioni di temperatura, nutrimento e anaerobiosi sono ideali per la proliferazione di batteri anaerobi dannosi.


Queste colonie di batteri hanno a disposizione un volume maggiore della più profonda tasca parodontale possibile.

Di conseguenza, per OGNI impianto posizionato, con diversi gradi di intensità, si osservano questi fenomeni:

- Perdita ossea crestale
- Tessuti molli infiammati e sanguinanti
- Cattivo odore

PER OLTRE IL **20%** DEGLI IMPIANTI, QUESTO PORTA ALL'INSORGENZA DELLA **PERIMPLANTITE** NEL MEDIO PERIODO, CON PERDITA TOTALE DELL'IMPIANTO.

TUNNEL IMPLANTARE

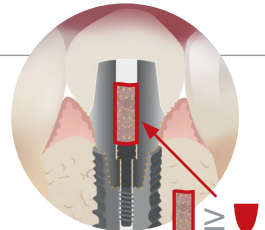


TASCHE PARODONTALI



SICUREZZA ATTENZIONE AGIRE SUBITO RISCHIO ELEVATO DI PERDITA DEL DENTE

PROFONDITÀ DELLA TASCA

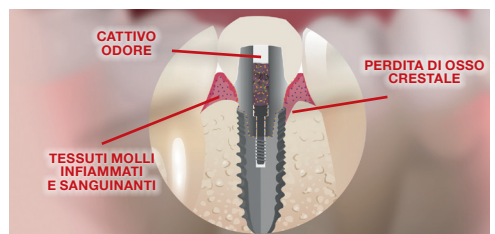


COME L'ARGENTO AGISCE DA ANTIBATTERICO?

Lo ione di argento (Ag^+) è considerato l'agente antibatterico con lo spettro più ampio, grazie alle sue qualità uniche, al suo utilizzo secolare e all'assenza di controindicazioni: numerose applicazioni e svariati prodotti medicinali a base di argento si sono susseguiti nei secoli, inclusi molti antibiotici e le tecniche di purificazione dell'acqua, dalle cisterne degli antichi Egizi ai veicoli spaziali della NASA.

In **SilverPlug®**, il carrier che veicola gli ioni Ag^+ è una zeolite nano-porosa (alluminosilicato di sodio). La Zeolite d'Argento ha la funzione di preservare il prodotto, mantenendo il microambiente del dispositivo attraverso la riduzione della proliferazione batterica.

AZIONE DELL'ARGENTO SUI BATTERI

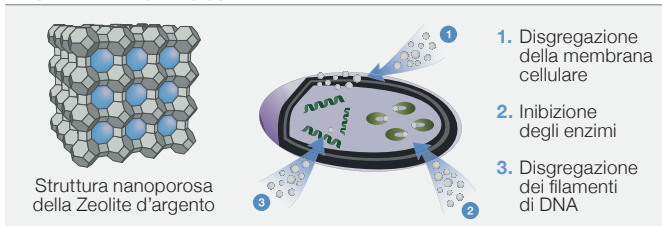

COME USARE SILVERPLUG®

- La sua forma tronco-conica consente un adattamento perfetto indipendentemente dal diametro del tunnel di accesso alla vite di serraggio per corone avvitate, abutment o protesi tipo Toronto avvitate.
- Solido e facile da manipolare, semplice da inserire e da rimuovere dal tunnel.
- Qualsiasi tipo di composito o cemento sia provvisorio che definitivo può essere usato per la finalizzazione dell'intervento.

VANTAGGI PER PAZIENTI E DENTISTI:

- Garantisce tessuti peri-implantari più sani: gengive rosa, perdita ossea contenuta, nessun cattivo odore.
- Consente al dentista di fare tutto ciò che è possibile, per evitare l'insorgenza della perimplantite nei Pazienti, eliminandone una delle cause che, fino ad ora, era impossibile controllare.
- Previene qualsiasi implicazione legale per il Medico, con Pazienti e Assicurazioni Sanitarie, derivante dall'uso di materiali di riempimento inappropriati.

1 Scatola contiene
20 SilverPlug®

160,00 euro



CE 0476


ISTRUZIONI D'USO



1. Disinfezione dell' impianto.



2. Disinfezione dell'abutment

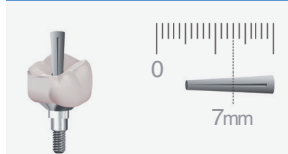


3. Misurazione



4. Taglio



5. Inserimento

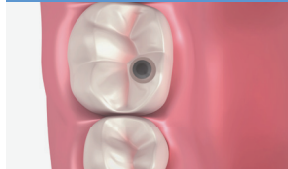

6. Controllo



7. Finalizzazione

www.silveraid.it - sales@silveraid.it

Silveraid s.r.l. - Via R. Lepetit 34 - Gerenzano (VA) Italy

Attenzione: SILVERPUG® è concepito per il solo utilizzo da parte di personale medico.